




ULTRABABY U-2

MBSC ULTRA U-2 0-1kg x 2g 1-27kg x 5g

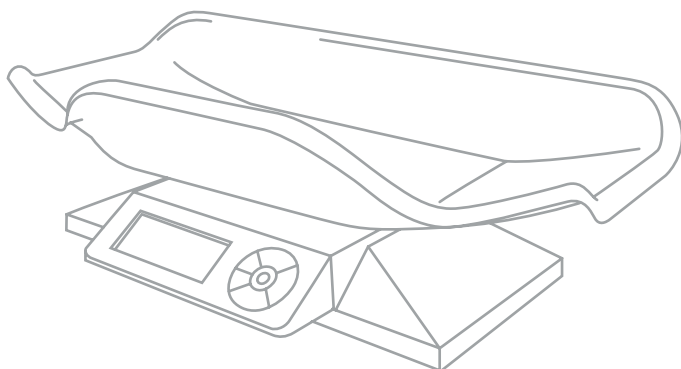

MANUEL UTILISATEUR

PRECAUTIONS DE SECURITE

La balance doit toujours être utilisée dans un environnement sans courant d'air excessif, produit corrosif, vibration, température ou humidité extrême. Ces facteurs auraient un effet sur la précision et les performances. Veuillez consulter www.myweigh.com pour une version actualisée de ce manuel, en cas de révision possible.

Tout les messages de sécurité sont identifiés avec les mots "ATTENTION" et "PRECAUTION". Ces mots ont la signification suivante:



ATTENTION

Information importante pour vous alerter d'une situation qui pourrait causer des blessures graves ou dommages importants si les instructions ne sont pas suivies.



PRECAUTION

Information importante qui permet d'éviter d'endommager le matériel.

Toujours respecter les précautions de sécurité suivantes lors de l'utilisation de cette balance.



Uniquement utiliser l'adaptateur AC/USB correspondant à cette balance. D'autres adaptateurs pourraient causer des dommages électriques permanent.

Eviter de placer la balance directement au soleil, cela pourrait causer décoloration et mal-fonction.

Remplacer toutes les piles en même temps – Ne pas remplacer uniquement une partie des piles car cela pourrait provoquer des malfonctions.

Lorsque la balance n'est pas utilisée pendant longtemps, retirer les piles pour éviter toute fuite qui pourrait endommager la balance.


Ne pas surcharger la balance, cela pourrait causer des dommages permanents et annulerait ainsi la garantie – veuillez ne JAMAIS excéder la capacité maximum de la balance.

Tenir la balance à distance de l'eau – cette balance n'est pas résistante à l'eau. Choc, blessure et dommage électrique sont possible en cas d'usage dans un endroit humide!


Des objets chargés d'électricité statique peuvent avoir un effet sur la précision. Décharger tout électricité statique. Par exemple, une méthode est d'utiliser un spray Anti-Statique et d'en pulvériser sur les deux cotés de la plateforme de pesée.

PARTS DESCRIPTION


• BOUTONS

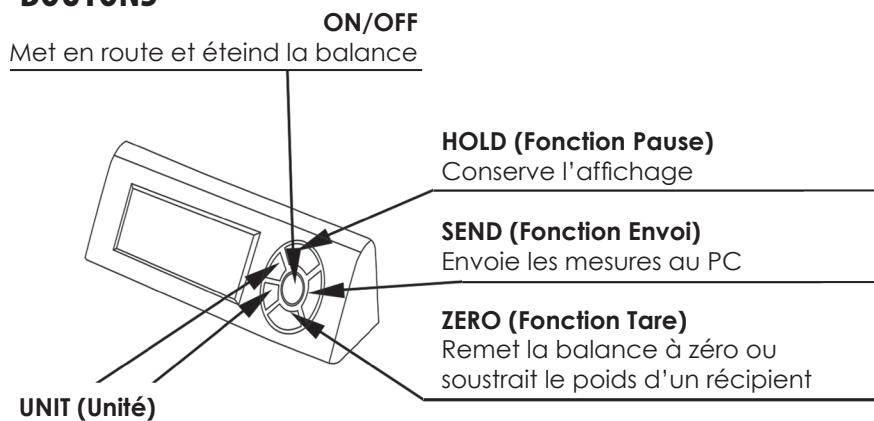


• DOS

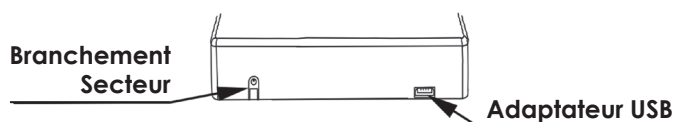

• DESSOUS

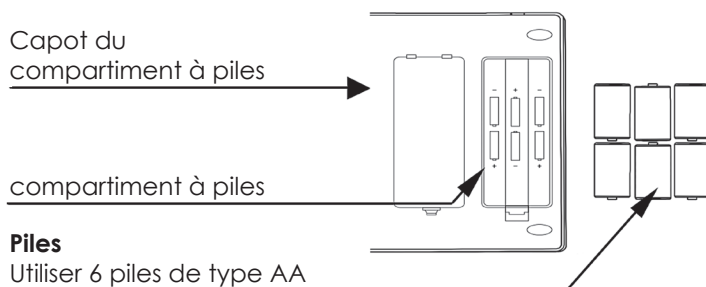

• AFFICHAGE

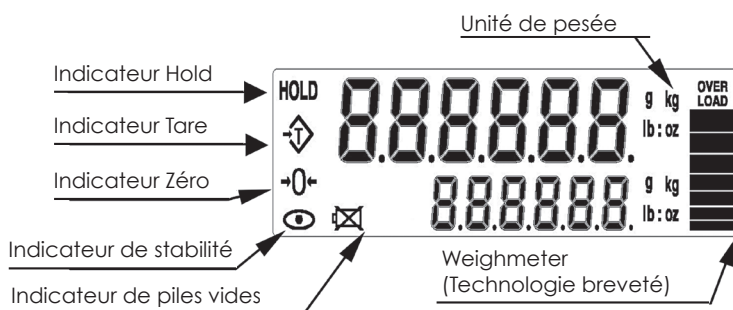

FONCTION HOLD

Une fois le bouton **HOLD** pressé, le poids restera affiché même si l'objet a été retiré de la balance. De cette manière le poids peut être lu facilement.

- 1) Placer l'objet sur la plateforme de la balance.
- 2) Attendre que la pesée stable soit affichée.
- 3) Appuyer le bouton **HOLD**. L'indicateur "HOLD" va s'afficher.
- 4) Retirer l'objet de la plateforme de la balance. La mesure continuera à s'afficher. Il est alors possible de convertir cette mesure dans d'autres unités (ex. Livres ou Kilogrammes) en pressant les boutons **M1** ou **M2**.
- 5) Pour quitter la fonction HOLD: Une fois qu'un objet a été pesé et que la fonction hold a été mis en route, il est possible d'annuler la fonction hold en pressant **HOLD** à nouveau pour éteindre l'indicateur "HOLD" et revenir ainsi au mode de pesée normal.

PESER

Avant de peser

Dans la mesure du possible, veuillez permettre à la balance de se réchauffer pendant plusieurs secondes après la mise en route pour que la balance fonctionne correctement et avec précision.

Messages d'erreur

" " indique que les piles sont vides & "OVER LOAD" indique une surcharge.

Procédures de pesée

- 1) Appuyer  pour mettre la balance en route. La balance mettra quelques instants à s'allumer puis sera prête à être utilisée.
- 2) **M1 M2** pour sélectionner les unités. Deux unités peuvent s'afficher de manière simultanée. Presser et relacher le bouton **M1** une fois pour changer l'unité de la ligne supérieure. Presser et relacher le bouton **M2** une fois pour changer l'unité de la ligne inférieure. Vous pouvez sélectionner g (grammes), kg (kilogrammes), lb/oz (livres/onces), lb (livres) ou bien oz (onces).
- 3) Commencer la pesée.

Si la balance est utilisée sans récipient

Vérifier que "0" s'affiche. Sinon appuyer **TARE** pour afficher "0". Placer l'objet à peser sur la plateforme de la balance. Lorsque la mesure se stabilise, la pesée stable s'affiche.

Si la balance est utilisée avec un récipient

Placer un récipient vide sur la plateforme de la balance. Attendre que l'indicateur de stabilité s'affiche ou que le poids se stabilise et appuyer **TARE**. Placer les objets à peser dans le récipient. Lorsque la mesure se stabilise, la pesée stable s'affiche.

CONTROLE DU AUTO-OFF

Appuyer simultanément sur **HOLD** et  pour mettre la balance en route, puis relacher les deux boutons (ne pas attendre que la balance commence un compte à rebours) l'écran va afficher "00000", puis "OFF 0" (fonction OFF éteinte) ou "OFF 1" (fonction OFF en action après 2 minutes) ou "OFF 2" (fonction OFF en action après 5 minutes), sélectionner l'une de ces options en pressant **SEND**. Confirmer ensuite ce choix en pressant **TARE**. La balance retournera en mode de pesée normale.

CALIBRATION

Quand calibrer?

Une calibration n'est que rarement requise.

Il est possible d'avoir à calibrer lors de la première utilisation si la balance est imprécise ou si elle est utilisée à différentes altitudes ou gravités. Cela est nécessaire car le poids d'une masse à un endroit n'est pas forcément le même qu'à un autre endroit. D'autre part avec le temps et l'utilisation, des déviations mécaniques peuvent se former.

Comment calibrer?

- 1) Eteindre la balance sur une surface plane et stable.
- 2) Appuyer simultanément sur **M1** et **ⓘ** pour mettre la balance en route puis relâcher les boutons, attendre que "CL. xx" (le numéro xx est le poids requis pour la calibration) s'affiche, appuyer **M1** pour choisir l'unité de calibration entre "Lb" et "kg".
- 3) Presser le bouton **HOLD** pour changer la valeur des dix chiffres et appuyer sur le bouton **TARE** pour changer la valeur des unités, puis appuyer le bouton **M2** pour confirmer le poids de calibration. L'écran affichera "CAL", si le poids requis est trop petit ou trop grand, il affichera "Err", presser le bouton **TARE** et l'écran affichera "CL. xx" clignotant.
- 4) Placer le(s) poids de calibration au centre de la plateforme, patienter 3 secondes, appuyer sur **TARE**.
- 5) L'écran affichera "PASS". La calibration est finie. Après quelques secondes la balance va revenir en mode de pesée normale. Retirer les poids du plateau de pesée et éteindre la balance.

Si la calibration est incorrecte répétitivement

- 1) Remplacer les piles.
- 2) Essayer une surface plus stable, sans vibration ou interférence.
- 3) S'assurer qu'aucune électricité statique soit présente (utiliser un spray anti-statique).



ATTENTION




Le plateau pour bébé et la base élargie DOIVENT ETRE TOUS DEUX attachés correctement à la balance lors de la pesée d'un bébé. Ne pas respecter ces consignes pourrait causer des blessures graves. Ne jamais utiliser le plateau pour bébé sans la base élargie.

INSTALLER ET RETIRER LA BASE

Retirer la base en tirant sur sa patte de rétention (1) et en glissant la base vers l'arrière de la balance. Installer la base en introduisant les quatre pattes de la base dans les quatre trous du dessous de la balance (2) et en glissant la base vers l'avant de la balance. La patte de rétention (1) va cliquer et ainsi sécuriser la balance sur la base

INSTALLER ET RETIRER LE PLATEAU (valable pour les 2 types de plateau)

Retirer le plateau en appuyant sur sa patte de rétention (4) et en glissant le plateau vers la droite puis en le soulevant. Installer le plateau en introduisant ses huit pattes dans les huit trous du dessus de la balance (3) et en glissant le plateau vers la gauche. La patte de rétention (4) va cliquer et ainsi sécuriser le plateau sur la balance.

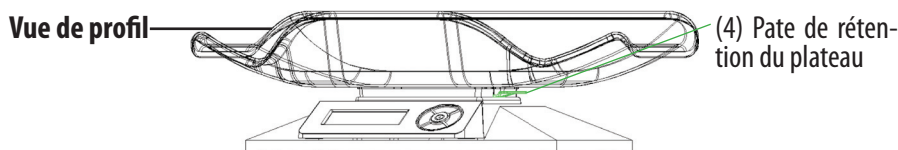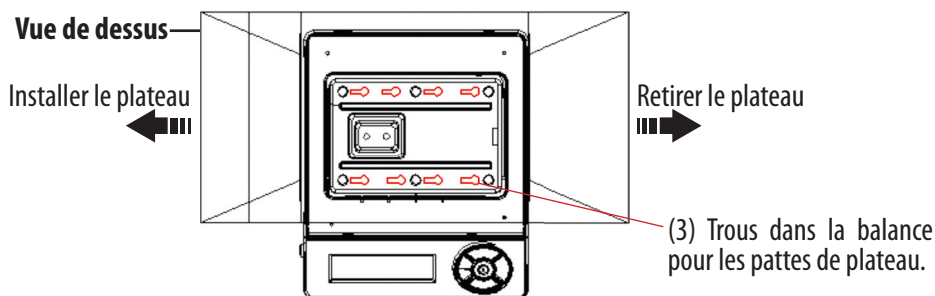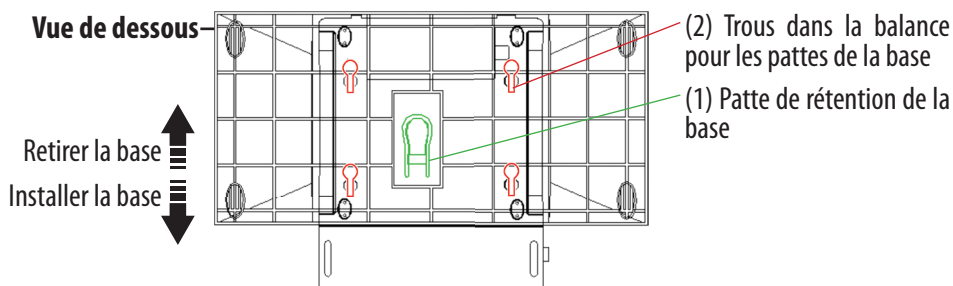



Cellulaires, Téléphones sans fil, certaines lumières fluorescentes et certains appareils à fréquences radio peuvent interférer avec la balance et causer des dysfonctionnement. Veuillez ne pas utiliser d'autres appareils électroniques à proximité de cette balance. Tout comme les avions, ne pas utiliser de cellulaire à proximité de la balance lorsque celle-ci est en marche. Bien qu'il n'y ait aucun risque de dommage permanent pour la balance, les interférences peuvent mener à une calibration ou des mesures incorrectes.

DEPANNAGE & NOTES DE MANIPULATION

- 1) Si les mesures de la balance ne sont pas précises, veuillez re-calibrer comme indiqué dans ce manuel.
- 2) Si l'écran venait à se bloquer sur "----" cela indique que la balance a été choquée, a chuté ou a été endommagée d'une quelconque autre manière et que les délicats détecteurs ont été endommagés. Il est possible de tenter une calibration (si le détecteur n'a pas été trop endommagé cela peut fonctionner). Si cela ne fonctionne pas, il faut alors suivre les instructions de la garantie qui accompagnait la balance.
- 3) Si l'écran n'affiche plus correctement ou si la balance ne veut pas s'allumer, c'est le plus fréquemment l'indication que les piles sont faibles ou que l'alimentation est mauvaise. Si de nouvelles piles ou un changement d'alimentation ne résolvent pas ce problème, la balance devra alors nous être envoyée pour un remplacement suivant notre programme de garantie.
- 4) Si "UNST" s'affiche, cela signifie que la balance n'est pas stable. Veuillez essayer de placer la balance sur une surface plus stable et assurez-vous que rien ne repose sur la plateforme ou que rien n'est coincé entre la plateforme et la balance. Si la situation persiste, cela peut indiquer qu'il s'agit d'un détecteur endommagé.

Même si l'Ultrababy U2 a été conçu pour être extrêmement durable, il est important de ne jamais surcharger, secouer ou choquer la balance. S'assurer que la balance est emballée avec la plus extrêmement précaution lors d'un envoi par courrier pour éviter tout problème. Les balances sont des instruments délicats qui ont des détecteurs délicats qui déterminent ce qu'un objet pèse. Si la balance est choquée ou est victime d'une chute, les détecteurs "ressentent" le choc et sont parfois détruits. Cela arrive avec toutes les balances électroniques. Nous concevons nos balances pour qu'elles soient le plus résistantes possible, mais il nous est impossible de garantir à 100% contre des dommages faits aux détecteurs. Une balance traitée correctement procurera des années de mesures sûres et précises. En outre un usage abusif va entraîner des dégâts sur les détecteurs. Pour plus d'information et d'aide au dépannage, visiter **www.myweigh.com**

PROGRAMME INFORMATIQUE & CONNECTIVITE USB

L'Ultrababy U2 peut être connecté à la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Windows® grâce à notre programme gratuit (activation VX.X.exe). La version la plus récente de ce programme est disponible sur

www.myweigh.com/ultrasoftware

Si la fenêtre d'activation est fermée, la communication va stopper.

SPECIFICATIONS

- Mise hors tension automatique (optionnelle)
- Détecteur auto-zéro
- Alimentation Secteur/USB (optionel)
- Panneau d'écran détachable sur cordon flexible
- Conversion g /lb:oz /kg/lb/oz
- Très grand LCD à double lecture
- Fonction Hold
- Grande plateforme avec multiples attaches
- Technologie Weighmeter

ULTRABABY U-2

Capacité	0-2lb/0-1kg 2-60lb/1-27kg	Précision	2g/0.1oz 5g/0.2oz
Dimension	533mm x 272mm x 89mm		
Poids net/brute	1.95kg / 2.60kg		
Temperature d'utilisation	Optimum 15-30°C (62-90°F)		
Alimentation	6 x AA piles alcalines ou adaptateur secteur 5V-9V/100mA ou adaptateur USB 5V/100mA		

